

# MORSA

## Wachswarenfabrik Sallinger GmbH

**MORSA: The international competence for dental waxes**



Im Hauptgebäude der Wachswarenfabrik MORSA werden die im vorliegenden Katalog abgebildeten Dentalwaxse hergestellt.

*MORSA Waxse wurden im Verlauf der letzten Jahre durch permanenten Kontakt mit Praktikern und Dentalforschern weiterentwickelt. Die Geschäftsleitung des Hauses Sallinger freut sich über jede Rückmeldung von Dentaltechnikern und Zahnärzten, die sich aus der Praxis mit Vorschlägen, Anregungen und konstruktiven Kritikpunkten an MORSA wenden. Für neue, in Produkte umgesetzte Ideen erhalten Sie von uns eine Prämie.*

*Für das jahrelange Vertrauen danken wir unseren Kunden recht herzlich.*

*Die Firma Müller Dental GmbH, Postfach 11 30, 51779 Lindlar, Tel. 0 22 66 / 47 42 - 0, Fax 0 22 66 / 34 17 und ihre Mitarbeiter repräsentieren unsere Waxse in ganz Deutschland. Internet: [www.mueller-omicron.de](http://www.mueller-omicron.de) · E-Mail: [info@mueller-omicron.de](mailto:info@mueller-omicron.de)*

*MORSA dental waxes have permanently been improved and tested in cooperation with numerous dentists and experts in the field of dental techniques. The MORSA management welcomes every practical hint of further improvements and puts a premium on every accepted suggestion.*

*Our representative in Germany: Müller Dental GmbH, Postfach 11 30, 51779 Lindlar, Tel. 0 22 66 / 47 42 - 0, Fax 0 22 66 / 34 17 .*

*Internet: [www.mueller-omicron.de](http://www.mueller-omicron.de) · E-Mail: [info@mueller-omicron.de](mailto:info@mueller-omicron.de)*

**MORSA** Wachswarenfabrik Sallinger GmbH  
Nordstraße 3 · 86381 Krumbach / Germany  
Telefon 0 82 82 / 40 95 / 96 / 97 · Fax 0 82 82 / 58 96  
Internet: [www.morsa.de](http://www.morsa.de) · E-Mail: [morsa@t-online.de](mailto:morsa@t-online.de)



# MORSA

Wachswarenfabrik Sallinger GmbH

The international competence for dental waxes

NEU!



# MORSA

## Wachswarenfabrik Sallinger GmbH

Begriff für Qualität: Elf Bundessiegerpreise für Morsa-Wachskieher

Die Tradition der Wachsverarbeitung im Hause Sallinger reicht nachweisbar zurück bis ins Jahr 1647. Aufbauend auf dieser jahrhundertelangen Tradition in seiner Familie entwickelte Moritz Sallinger zu Beginn dieses Jahrhunderts als einer der ersten Wachsfabrikanten in Europa Dentalwachs. Permanente Kontakte mit Dentaltechnikern und Zahnärzten über Jahrzehnte hinweg trugen wesentlich zur hohen Qualität der produzierten Dentalwachs bei. Mittlerweile wurden Dentalwachs bei **MORSA** in enger Zusammenarbeit mit hochqualifizierten Labortechnikern, Zahnärzten und Dentalwissenschaftlern weiterentwickelt.

Das Dentalwachsprogramm der Firma **MORSA** ist so erfolgreich, daß es weltweit exportiert wird. Die Qualität der **MORSA**-Wachsprodukte wurde im Laufe der letzten Jahre durch eine Reihe von Auszeichnungen belegt. Bis zum heutigen Tag haben die Mitarbeiter der Wachswarenfabrik Sallinger GmbH neun Bundessiegerpreise für die jahrgangsbesten Absolventen der Ausbildung zum Wachskieher erhalten.

Da eine Reihe von **MORSA**-Qualitätswachsen neutral an unsere Händlerkunden verkauft wird, erkennt der Verbraucher **MORSA**-Wachs nicht immer am Etikett. Sollten Sie Zweifel an der Echtheit eines als **MORSA**-Produkt benannten Dentalwachses haben, können Sie sich gerne an unser Haus wenden. Wir können Ihnen dann mitteilen und prüfen, ob es sich um eine Original **MORSA**-Qualität handelt oder nicht. Ebenso ist es möglich, bei größerem Bedarf auch Sonderentwicklungen herzustellen oder aber aus dem vielfältigen **Sonderentwicklungsprogramm**, das wir über Jahre für verschiedenste Kunden gefertigt haben, auch für spezielle Wünsche weitere Wachs, die nicht in diesem Katalog abgebildet sind, zu produzieren. (Die Mindestmenge hängt vom Wachsartikel ab.)

Sollten Sie weitere Fragen zu unseren Dentalwachsen haben, können Sie sich gerne an die Geschäftsleitung unseres Hauses wenden. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Informationen zur Verfügung.

Nun wünschen wir Ihnen eine angenehme und erfolgreiche Arbeit mit **MORSA**-Dentalwachsen.

Ihr  
Dr. Hermann Sallinger  
**MORSA** Wachswarenfabrik  
Sallinger GmbH

*PS: An Kritik und Anregungen sind wir sehr interessiert. Wir versuchen, jede Rückmeldung unserer Kunden zu weiterer Qualitätsverbesserung zu nutzen.*

*Für die gute Zusammenarbeit danken wir den Labors Miller & Schmuck in Augsburg, Kurtz in Illertissen und Cremer Zahntechnik in Dreieich sowie Herrn Miller für die Erstellung der Laborfotos.*

The tradition of the Sallinger company dates back to the year 1647, documented in historically verifiable sources. From the centuries-old family tradition, the **MORSA** Wachswarenfabrik Sallinger GmbH company developed in a dynamic manner into one of the best manufacturers of dental waxes. Meanwhile **MORSA** dental products are not only widely known in Germany but also in other European countries as well as overseas.

**MORSA** dental waxes are constantly improved. The company is able to offer a wide range of dental waxes, which have been developed and tested in cooperation with many dentists and experts in the field of dental techniques.

As several **MORSA** quality waxes are sold under private label, you will not always recognize **MORSA** waxes by their labels. If you have some doubts about the authenticity of **MORSA** products, you are welcome to consult us. Then we can determine for you which are original **MORSA** waxes and which not. We are also very flexible with regard to special developments and we are able to produce individual wax qualities for you.

Should you require references from renowned European dental companies, we could send you the respective literature with pleasure.

We will gladly help you with technical questions and further information and remain

Yours faithfully  
Dr. Hermann Sallinger  
**MORSA** Wachswarenfabrik Sallinger GmbH

# 3. MODELLGUSSWACHSE/WAXES FOR CHROME COBALT FRAMEWORKS

## 3.5.3 Bonyhard

- 10 Lagen

## 3.5.3 Bonyhard

- 10 layers



Best.-Nr. DH 000 117 NB 813

grün/green

## 3.5.4 Ringklammern

- 10 Lagen

## 3.5.4 Ring clamps

- 10 layers



Best.-Nr. DH 000 118 NB 813

grün/green

# 4. WACHSDRAHT/WAX WIRE

## Wachsdraht

- verschiedene Stärken
- vielfach bewährt

## Wax wire

- various thickness
- highly proven



Best.-Nr. DH 000 131 NB 813

grün/Rolle

green/role

250 g - 3,0 mm

Best.-Nr. DH 000 132 NB 813

grün/Rolle

green/role

250 g - 3,5 mm

Best.-Nr. DH 000 133 NB 813

grün/Rolle

green/role

250 g - 4,0 mm

Best.-Nr. DH 000 134 NB 813

grün/Rolle

green/role

250 g - 5,0 mm


# 3. MODELLGUSSWACHSE/WAXES FOR CHROME COBALT FRAMEWORKS

## 3.3 Gitterretentionen

- grün
- 20 Platten

## 3.3 Lattice retentions

- green
- 20 sheets

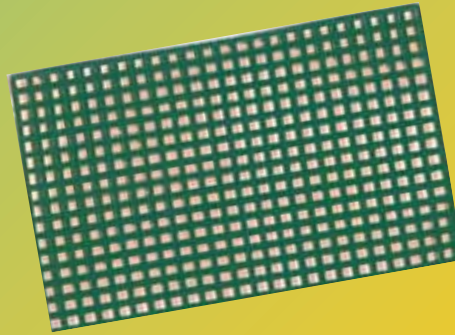

Best.-Nr. DH 000 119 NB 805

grün/green


40 x 60 mm

## 3.4 Rundlochretentionen

- rot
- 25 Stege

## 3.4 Round-hole retentions

- red
- 25 bars

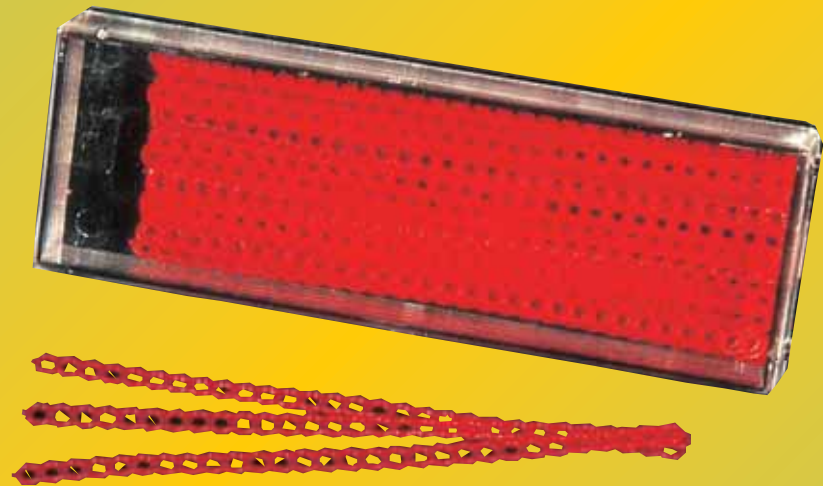

Best.-Nr. DH 000 122 NB 805

rot/red

## 3.5 Wachs-schablonen



### 3.5.1 Molarenklammern

- grün
- 10 Lagen

## 3.5 Wax-templates

### 3.5.1 Molar clamps

- green
- 10 layers

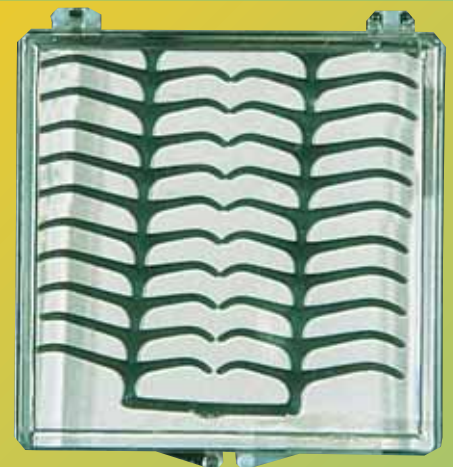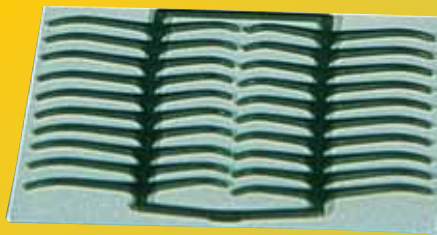

Best.-Nr. DH 000 115 NB 813



grün/green

### 3.5.2 Prämolaren

- 10 Lagen

### 3.5.2 Premolars

- 10 layers

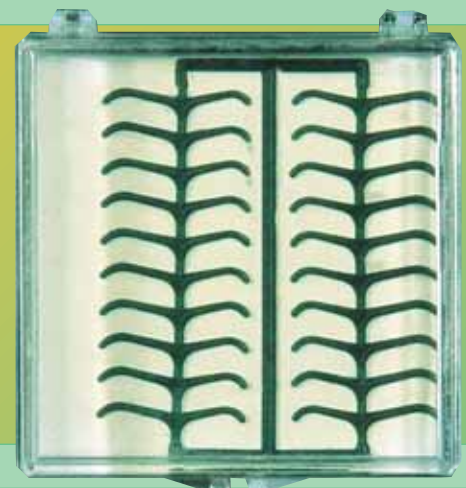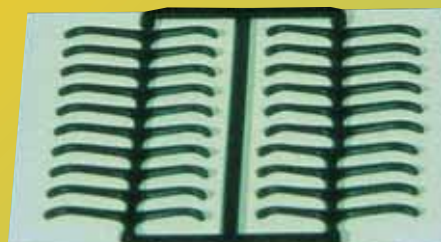

Best.-Nr. DH 000 116 NB 813

grün/green

# MORSA - Wachswarenfabrik Sallinger GmbH

In unserer Fabrik in Krumbach in Bayerisch-Schwaben werden MORSA-Dentalwachse von erfahrenen und qualifizierten Mitarbeitern produziert. Ständige Bemühungen um Verbesserung, Weiterentwicklung sowie konstante Qualitätsprüfung zählen dabei für unsere Mitarbeiter ebenso zur täglichen Arbeit wie permanente Kontakte mit führenden Dental-Labors.



Im Hauptgebäude der Wachswarenfabrik MORSA, das 1960 fertiggestellt und zuletzt im Jahr 1996 umgebaut wurde, arbeiten neben unserer Stammmannschaft zahlreiche saisonale Kräfte. MORSA-Wachse werden ausschließlich in Krumbach in Bayern produziert. Jeder Auftrag für die MORSA Wachswarenfabrik Sallinger GmbH ist deshalb ein Beitrag zur Arbeitsplatzsicherung in Deutschland. (main building of Morsa, where all dental waxes are produced)



Mit speziell für die Firma entwickelten vollautomatischen Anlagen werden Plattenwachse mit höchster Qualitätskonstanz hergestellt. (production hall)



Die Gießerei ist unverzichtbarer Bestandteil jeder Wachswarenfabrik und setzt eine sehr lange Tradition auf der Grundlage aktuellen Wissens fort. (foundry)



Ein Sonderbereich der Dentalwachsherstellung ist die permanente Qualitätskontrolle der MORSA-Dentalwachse, die sowohl innerhalb des Hauses als auch durch Heranziehung von Partnerlabors erfolgt. (quality control of dental waxes)



Die Auftragsbearbeitung der Firma MORSA Wachswarenfabrik Sallinger GmbH erreichen Sie während der Geschäftszeiten unter **Tel. 0 82 82 / 40 95, 40 96 und 40 97** sowie außerhalb der Geschäftszeiten per **Fax 0 82 82 / 58 96** oder per Anrufbeantworter. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. (office)

# 1. PROTHETIK/PROSTHETICS

## 1.1 Rosa

### Plattenwachse:

Elastisch, kantenfest, schnell härtend, exakter Schnitt, hohe Modellierfähigkeit.



## 1.1 Pink

### wax sheets:

Supple, firm edges, harden rapidly, can be cut precisely, easily sculptured.



#### 1.1.1 „Extrahart Super“

Das ideale Sommerwachs – bei Verarbeitung angenehm elastisch, bei Abkühlung geringe Kontraktion und bei Raumtemperatur hart.


#### 1.1.1 "Extra hard Super"

The perfect summer wax – pleasantly supple during use, minimal contraction during cooling and hard at room temperature.

Best.Nr. DM 000 101 VA 804      175 x 80 x 1,25 mm      brutto ca. 500 g / gross weight: appr. 500 g

#### 1.1.2 „Superhart pink“

Eine perfekte Neuentwicklung im Bereich der Plattenwachse. Optimale Modellereigenschaften, kühlt schnell ab, geringe Schrumpfung, sehr hart! Das unersetzliche Aufstellungswachs für die Sommerzeit.

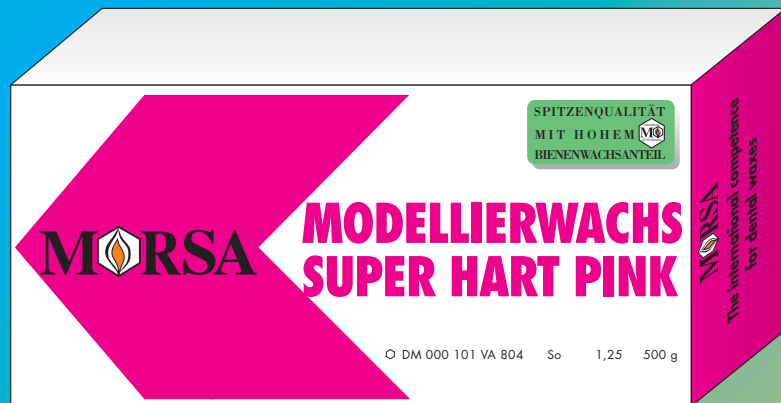

#### 1.1.2 "Super hard pink"

A perfect, new development in sheet waxes. Optimum sculpturing properties, cools rapidly, minimal shrinkage, very hard! The indispensable setting-up wax for use in summer.



**Praxistip von Zahntechnikermeister Kurtz, Illertissen:** Für die schnelle und vorläufige Aufstellung, z. B. bei Modellguß- und Teleskoparbeiten ideal.  
**Practical hint from Herr Kurtz, (Master Dental Technician):** Ideal for wax base plates and setting up teeth - especially for contouring.

Best.Nr. DM 000 127 VA 804      175 x 80 x 1,25 mm      brutto ca. 500 g / gross weight: appr. 500 g  
 Best.Nr. DM 000 128 VA 804      175 x 80 x 1,25 mm      brutto ca. 2,5 kg / gross weight: appr. 2,5 kg

# 3. MODELLGUSSWACHSE/WAXES FOR CHROME COBALT FRAMEWORKS

## 3.1 Modellguß-Modellierwachs

Ideal zum Verbinden aller Wachse und Kunststoff-Fertigteile in der Modellgußtechnik.

## 3.1 Waxes for chrome cobalt - sculpturing waxes

Perfect for joining all waxes and prefabricated resin patterns when waxing-up patterns for chrome cobalt appliances.



Best.-Nr. DG 000 108 HD 800 blau/blue 50 g Dose/50 g tube

## 3.2 Modellgußwachsplatten



Verschiedene Stärken

- glatt, blau
- glatt, weiß
- genarbt, grün (fein oder grob)
- 15 Platten

## 3.2 Wax sheets for chrome cobalt frameworks

Various thickness

- smooth, blue
- smooth, white
- stippled, green (fine or coarse)
- 15 sheets

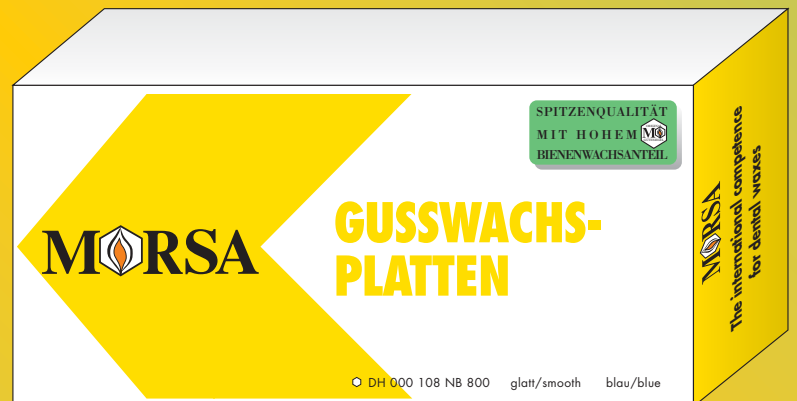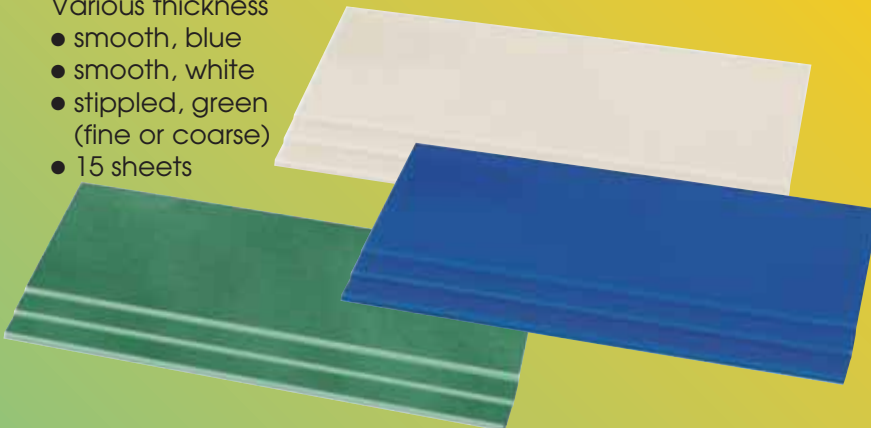

Best.-Nr. DH 000 108 NB 800	glatt/smooth	blau/blue	175 x 80 x 0,25 mm	Best.-Nr. DH 000 124 NB 813	fein genarbt/ fine stippling	grün/green	175 x 80 x 0,30 mm
Best.-Nr. DH 000 109 NB 800			175 x 80 x 0,30 mm	Best.-Nr. DH 000 126 NB 813			175 x 80 x 0,40 mm
Best.-Nr. DH 000 110 NB 800			175 x 80 x 0,40 mm	Best.-Nr. DH 000 127 NB 813			175 x 80 x 0,50 mm
Best.-Nr. DH 000 111 NB 800			175 x 80 x 0,50 mm	Best.-Nr. DH 000 128 NB 813			175 x 80 x 0,60 mm
Best.-Nr. DH 000 112 NB 800			175 x 80 x 0,60 mm	Best.-Nr. DH 000 144 NB 813	grob genarbt/ coarse stippling	grün/green	175 x 80 x 0,30 mm
Best.-Nr. DH 000 113 NB 800			175 x 80 x 0,70 mm	Best.-Nr. DH 000 145 NB 813			175 x 80 x 0,40 mm
Best.-Nr. DH 000 114 NB 800			175 x 80 x 0,80 mm	Best.-Nr. DH 000 146 NB 813			175 x 80 x 0,50 mm
Best.-Nr. DH 000 148 NB 809	glatt/smooth	weiß/white	175 x 80 x 0,30 mm	Best.-Nr. DH 000 147 NB 813			175 x 80 x 0,60 mm
Best.-Nr. DH 000 149 NB 809			175 x 80 x 0,40 mm				
Best.-Nr. DH 000 150 NB 809			175 x 80 x 0,50 mm				
Best.-Nr. DH 000 151 NB 809			175 x 80 x 0,60 mm				



# 2. MODELLIERWACHSE/SCULPTURING WAXES

## 2.6 Aesthetikwachs

Zum Erlernen und Gestalten von Wachsmodellationen in ihrer natürlichen Form und Farbe. *Farbkastensystem* lieferbar in Farbabstimmung zwischen weißlich bis bräunlich (vier Farbtöne), Dose ca. 25 g (vier Dosen in Metallschachtel). *Nachfüllbox:* Einzeldosen zum Eingeben in Kasten

## 2.6 Aesthetic wax

For learning and designing the natural contours and shades of wax patterns. *Shade system* available in shades white to brown (four shades). Approximately 25 g tubes (four tubes in a metal box). *Re-fill box:* Single tubes for placing in the box.



Best.-Nr.	4er Set	
DR 000 122 HD 816	elfenbein/ivory	50 g Dose/50 g tube
DR 000 123 HD 809	creme/cream	50 g Dose/50 g tube
DR 000 124 HD 810	leicht bräunlich/light brown	50 g Dose/50 g tube
DR 000 125 HD 803	bräunlich/brown	50 g Dose/50 g tube
DR 000 126 HD 801		

## 2.7 Tauchwachse

Absolute Paßgenauigkeit, formstabil, keine Tropfenbildung, schnelle Härtung, geringe Schrumpfung.  
 • gelb • rot

## 2.7 Dipping waxes

Perfect precision of fit, dimensionally stable, will not drip, harden rapidly, minimal contraction.  
 • yellow • red




Best.-Nr. DR 000 127 HD 803	gelb/yellow	80 g Dose/80 g tube
Best.-Nr. DR 000 128 HD 805	rot /red	80 g Dose/80 g tube

## 2.8 Boxingwachs

• farblos

## 2.8 Boxingwax

• without colour

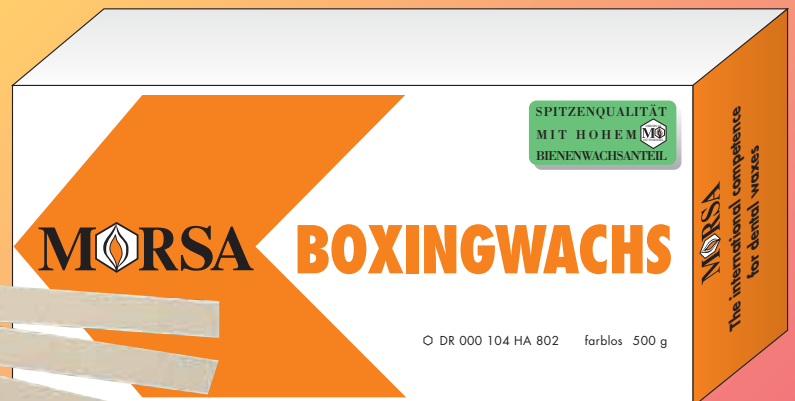

Best.-Nr. DR 000 104 HA 802	farblos/without colour	300 x 28 x 1 mm, 500 g
-----------------------------	------------------------	------------------------

# 1. PROTHETIK/PROSTHETICS

**NEU!**

## 1.1.3 Plattenwachs „FUTUR“

Neu entwickelt:  
Das besonders preisgünstige  
Allround-Wachs.




## 1.1.3 "FUTUR" wax sheets

NEW: A cost-effective all-round wax.

*Praxistip von Zahntechnikermeister J. Miller, Augsburg: Zur Einprobe im Mund optimal aufgrund von Farbe und Standfestigkeit.*

*Practical hint from Herr Miller (Master Dental Technician): "FUTUR" wax sheets can be optimally adapted in the mouth due to colour and stability.*

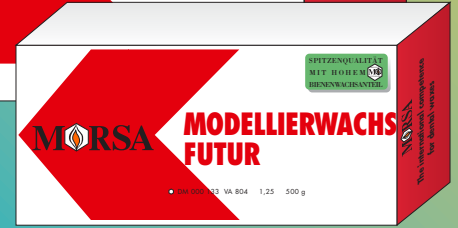

Best.-Nr. DM 000 133 VA 804 175 x 80 x 1,25 mm  
Best.-Nr. DM 000 134 VA 804 175 x 80 x 1,25 mm

brutto ca. 500 g/gross weight: appr. 500 g  
brutto ca. 2,5 kg/gross weight: appr. 2,5 kg

## 1.1.4 Plattenwachs „2000“

Allroundwachs für die gesamte  
Palette der Prothetikabteilung.



## 1.1.4 "2000" wax sheets

All-round wax for all applications in  
prosthetic departments.



Best.-Nr. DM 000 121 VA 804 175 x 80 x 1,25 mm  
Best.-Nr. DM 000 122 VA 804 175 x 80 x 1,25 mm

brutto ca. 500 g/gross weight: appr. 500 g  
brutto ca. 2,5 kg/gross weight: appr. 2,5 kg

## 1.1.5 „Euro“-Plattenwachs

Universell einsetzbares Wachs für je-  
de Temperatur im Sommer und Win-  
ter (ausgenommen bei extrem hoher  
Temperatur). Die Wachsalter-  
native für vielfältige Bereiche des  
europäischen Marktes.



## 1.1.5 "Euro" wax sheets

Universal wax for all summer and  
winter temperatures (except ex-  
tremely high temperatures).  
An alternative wax for a  
multitude of applications  
in Europe.



Best.-Nr. DM 000 123 VA 804 175 x 80 x 1,25 mm  
Best.-Nr. DM 000 124 VA 804 175 x 80 x 1,25 mm

brutto ca. 500 g/gross weight: appr. 500 g  
brutto ca. 2,5 kg/gross weight: appr. 2,5 kg

# 1. PROTHETIK/PROSTHETICS

## 1.1.6 „Top-Techno“

Das vielseitige Plattenwachs für die Kunststoffprothetik. Aufgrund etwas härterer Einstellung bei normalen Sommer- und Wintertemperaturen einsetzbar.

## 1.1.6 "Top-Techno"

The allround sheet wax for all acrylic denture procedures. For normal summer and winter temperatures.



Best.-Nr. DM 000 129 VA 804

175 x 80 x 1,25 mm

brutto ca. 500 g / gross weight: appr. 500 g

Best.-Nr. DM 000 130 VA 804

175 x 80 x 1,25 mm


brutto ca. 2,5 kg / gross weight: appr. 2,5 kg

## 1.1.7 „Spezial“

Das meistverkaufte MORSA-Plattenwachs. Das „Allround-Aufstellwachs“ für normale Sommer- und Winterreparaturen. Modellierwachs für die gesamte Kunststoffprothetik, gute Modelliereigenschaften und hohe Bruchfestigkeit, geringe thermische Kontraktion.

## 1.1.7 "Special"

Our best-selling sheet wax. The "all-round setting-up wax" for normal repairs in summer and winter. Modelling wax for all acrylic denture procedures – good sculpturing properties, high resistance to fracture, minimal thermal contraction.

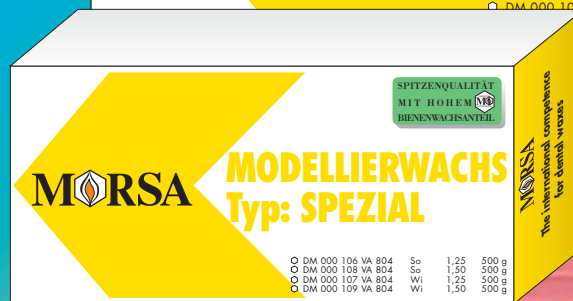

Best.-Nr. DM 000 106 VA 804

Sommer / summer

175 x 80 x 1,25 mm

brutto ca. 500 g / gross weight: appr. 500 g

Best.-Nr. DM 000 108 VA 804

Sommer / summer

175 x 80 x 1,50 mm

brutto ca. 500 g / gross weight: appr. 500 g

Best.-Nr. DM 000 102 VA 804

Sommer / summer

175 x 80 x 1,25 mm

brutto ca. 2,5 kg / gross weight: appr. 2,5 kg

Best.-Nr. DM 000 104 VA 804

Sommer / summer

175 x 80 x 1,50 mm

brutto ca. 2,5 kg / gross weight: appr. 2,5 kg

Best.-Nr. DM 000 107 VA 804

Winter / winter

175 x 80 x 1,25 mm

brutto ca. 500 g / gross weight: appr. 500 g

Best.-Nr. DM 000 109 VA 804

Winter / winter

175 x 80 x 1,50 mm

brutto ca. 500 g / gross weight: appr. 500 g

Best.-Nr. DM 000 103 VA 804

Winter / winter

175 x 80 x 1,25 mm

brutto ca. 2,5 kg / gross weight: appr. 2,5 kg

Best.-Nr. DM 000 105 VA 804

Winter / winter

175 x 80 x 1,50 mm

brutto ca. 2,5 kg / gross weight: appr. 2,5 kg

## 2. MODELLIERWACHSE/SCULPTURING WAXES

### 2.3 Fräswachs

Ideal zum Fräsen und Schaben. Verfügt über eine saubere Spanbildung und eine glatte Oberfläche.

- blau

### 2.3 Milling wax

Perfect for milling. Machines well to create smooth surfaces.

- blue



Best.-Nr. DR 000 118 HD 800

blau/blue

50 g Dose/50 g tube

### 2.4 Cervikalwachs

Für paßgenaue Kronenränder. Durch das spannungsfreie Auftragen und die geringe Erstarrungskontraktion ideal für die Kronenränder. Gute Adaption.

- rot
- blau

### 2.4 Cervical wax

For precision fit crown margins. Applied non-stressed, minimal solidification shrinkage – perfect for crown margins. Adapts well.

- red
- blue



#### **Praxistip von Zahntechnikermeister Miller:**

*Blaues Cervikalwachs ist ideal geeignet bei rotem Markierstift. Der Cervikalrand bleibt gut sichtbar.*

**Practical hint from Herr Miller (Master Dental Technician):** *Blue cervical wax is perfect for margins marked with a red marker – the cervical margin remains visible.*

Best.-Nr. DR 000 119 HD 805

Best.-Nr. DR 000 120 HD 800

rot/red

blau/blue

50 g Dose/50 g tube

50 g Dose/50 g tube

### 2.5 Ausblockwachs

Spezial-Wachs zum Ausblocken von Kavitäten und rauhen Oberflächen, besitzt einen hohen Schmelzpunkt, eine extreme Härte und läßt sich mit einem Stumpflack gut vernetzen.

- violett

### 2.5 Blocking-out wax

Special wax for blocking out cavities and rough surfaces – high melting point, extremely hard and easily wetted with die spacer.

- purple



Best.-Nr. DR 000 121 HD 815

violett/purple

50 g Dose/50 g tube

# 2. MODELLIERWACHSE/SCULPTURING WAXES

MORSA Modellierwachse werden in verschiedenen Labors umfangreich getestet, sind praxisbewährt und speziell abgestimmt auf die Anforderungen der Kronen- und Brückentechnik.

MORSA sculpturing waxes – fully tested in various laboratories, proven in everyday use, specifically designed to meet the needs of crown and bridge technology.

## 2.1 Kronenwachse

Das Allround-Kronenwachs für den anspruchsvollen Edelmetalltechniker, gefertigt nur aus besten Rohstoffen mit einmaligen Vorbereitungseigenschaften sowohl für die Aufwachstechnik wie die Schneidetechnik.

- grün
- grau, matte Oberfläche

## 2.1 Crown waxes

All-round crown wax for the demanding precious metal technician – made of only the best raw materials, unique properties for both building-up and carving.

- green
- grey, mat surface



Best.-Nr. DR 000 114 HD 813  
Best.-Nr. DR 000 115 HD 814

grün / green  
grau / grey

50 g Dose / 50 g tube  
50 g Dose / 50 g tube

## 2.2 Inlaywachse

Das ideale Inlaywachs, geringe Kontraktion, optimale Standfestigkeit und gute Modelliereigenschaften.

- grün
- mittelgrau

## 2.2 Inlay waxes

The perfect inlay wax, minimal contraction, optimum firmness and good sculpturing properties.

- green
- median grey



Best.-Nr. DR 000 116 HD 813  
Best.-Nr. DR 000 117 HD 814

grün / green  
mittelgrau / median grey

50 g Dose / 50 g tube  
50 g Dose / 50 g tube

# 1. PROTHETIK/PROSTHETICS

## 1.2 Weitere Prothetikwachse:

### 1.2.1 Bißwallwachs in Stangen

- rosa – normale Härte
- gelb – extra weich

## 1.2 Additional waxes for prosthetics:

### 1.2.1 Wax bite-blocks – rods

- pink – standard hardness
- yellow – extra soft



Best.-Nr. DB 000 105 AU 803	gelb/yellow	180 x 10 x 10 mm	brutto ca. 2 kg/gross weight: appr. 2 kg
Best.-Nr. DB 000 106 AU 804	rosa/pink	180 x 10 x 10 mm	brutto ca. 2 kg/gross weight: appr. 2 kg

### 1.2.2 Wachsbißwälle vorgeformt

- rosa – normale Härte
- gelb – extra weich

### 1.2.2 Wax bite-blocks – preformed

- pink – standard hardness
- yellow – extra soft



Best.-Nr. DB 000 112 AU 803	klein/small	gelb/yellow	69 Stück/69 pieces
Best.-Nr. DB 000 113 AU 803	groß/large	gelb/yellow	69 Stück/69 pieces
Best.-Nr. DB 000 114 AU 804	klein/small	rosa/pink	69 Stück/69 pieces
Best.-Nr. DB 000 115 AU 804	groß/large	rosa/pink	69 Stück/69 pieces

# 1. PROTHETIK/PROSTHETICS

## 1.2.3 Wachsbißwalle mit Aroma

- grun – Apfel
- rot – Erdbeere

Aromatische Binahme fur den Patienten, unterdruckt den Wurde-reiz.



## 1.2.3 Wax bite-blocks with flavouring

- green – apple
- red – strawberry

Bite-taking with aromatic bite-blocks helps prevent the patient gagging.



Best.-Nr. DB 000 116 AU 813  
 Best.-Nr. DB 000 117 AU 813  
 Best.-Nr. DB 000 118 AU 805  
 Best.-Nr. DB 000 119 AU 805

klein /small  
 gro /large  
 klein /small  
 gro /large

grun / green  
 grun / green  
 rot / red  
 rot / red

hart / hard  
 hart / hard  
 weich / soft  
 weich / soft


69 Stuck / 69 pieces  
 69 Stuck / 69 pieces  
 69 Stuck / 69 pieces  
 69 Stuck / 69 pieces

## 1.2.4 Schellack-Basisplatten

- braun (Natur-Schellack)
- rosa

## 1.2.4 Shellac baseplates

- brown (natural shellac)
- pink

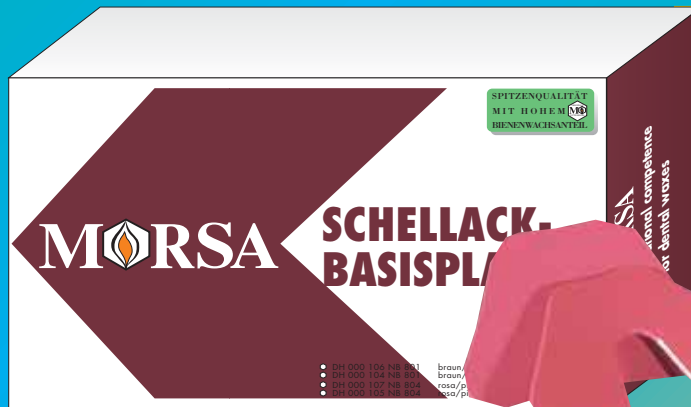

Best.-Nr. DH 000 106 NB 801  
 Best.-Nr. DH 000 104 NB 801  
 Best.-Nr. DH 000 107 NB 804  
 Best.-Nr. DH 000 105 NB 804

braun / brown  
 braun / brown  
 rosa / pink  
 rosa / pink

100 Stuck  
 100 Stuck  
 100 Stuck  
 100 Stuck

Groe 1 – UK / 100 pieces  
 Groe 1 – OK / 100 pieces  
 Groe 1 – UK / 100 pieces  
 Groe 1 – OK / 100 pieces

size 1 – lower  
 size 1 – upper  
 size 1 – lower  
 size 1 – upper

## 1.2.5 MORSA Klebewachs – 8 Scheiben


- gelb
- rosa

Hohe Klebkraft, hart, aber nicht sprode, geschmeidig.

## 1.2.5 MORSA sticky wax – 8 sheets

- yellow
- pink

Highly adhesive, hard but not brittle, supple.

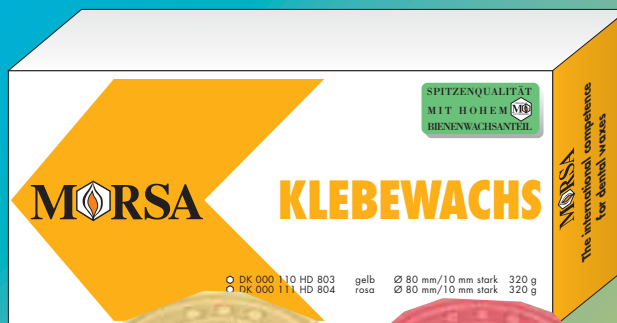

Best.-Nr. DK 000 110 HD 803  
 Best.-Nr. DK 000 111 HD 804

gelb / yellow  
 rosa / pink

Ø 80 mm, 10 mm stark /thick  
 Ø 80 mm, 10 mm stark /thick

brutto ca. 320 g / gross weight: appr. 320 g  
 brutto ca. 320 g / gross weight: appr. 320 g


# 1. PROTHETIK/PROSTHETICS

## 1.2.6 Original Friese Klebewachs

- rosa 24 Stangen
- Exclusive Spezialität nach Friese


## 1.2.6 Original Friese sticky wax

- pink 24 sticks
- Exclusive Friese speciality

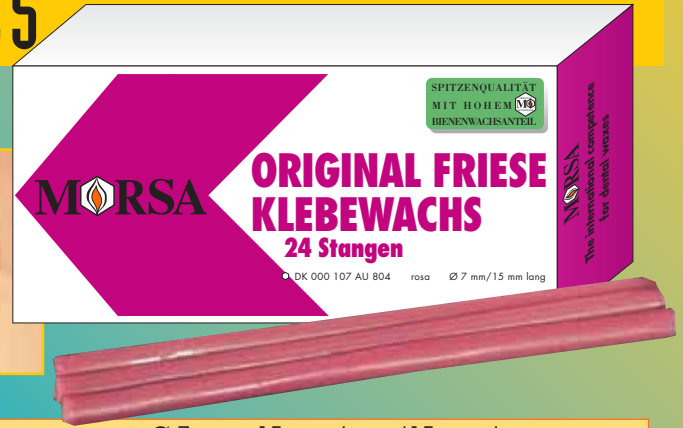

Best.-Nr. DK 000 107 AU 804 rosa/pink Ø 7 mm, 15 mm lang / 15 mm long

- 10 Scheiben
- 10 sheets
- 1 kg

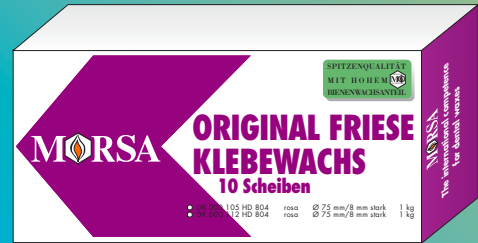


Best.-Nr. DK 000 105 HD 804 rosa/pink Ø 75 mm, 8 mm stark / 8 mm thick brutto ca. 1 kg / gross weight: appr. 1 kg  
 Best.-Nr. DK 000 112 HD 804 rosa/pink Ø 75 mm, 8 mm stark / 8 mm thick

## 1.2.7 Funktionsrandwachs und Abdrucklöffel-Erweiterungswachs

Jahrzehntelang bewährt, hohe Plastizität, exakte dorsale Abdämmung, kein Erwärmen notwendig.

- 32 Stangen

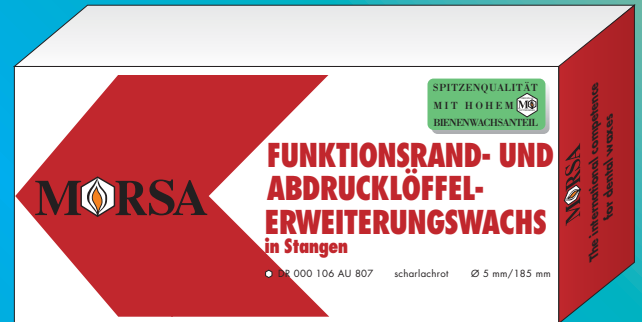

## 1.2.7 Functional periphery wax and impression tray extension wax

Proven over decades, highly plastic, exact dorsal postdams, does not need warming.

- 32 sticks



Best.-Nr. DR 000 106 AU 807 scharlachrot / scarlet 185 x Ø 5 mm

## 1.2.8 Alu-Bißwachs

Zeichnet Impressionen genau ab und läßt sich gut beschneiden.

## 1.2.8 Alu bite-wax

Records indentations precisely and is easily cut.



Best.-Nr. DB 000 104 HA 806 silber / silver 175 x 80 x 2 mm brutto ca. 250 g / gross weight: appr. 250 g